



Tabla de contenido

Parte 1
Introducción
Avances
Principios de tratamiento y trabajo
<ul style="list-style-type: none">- Estiramiento y reparación facial- Ojos Anti edad- Mejora de la papada- Anti-envejecimiento de cuello- Moldeamiento corporal
<ul style="list-style-type: none">- Moldeamiento de cintura y abdomen- Moldeamiento de senos- Moldeamiento de brazos- Moldeamiento de espalda- Moldeamiento de glúteos- Moldeamiento de Piernas
Parte 2
Parámetros técnicos
Precauciones de seguridad
Que hacer y que no
Preguntas y respuestas
Lista de empaque
Diagramas operacionales

Breve introducción

Las máquinas de cavitación ultrasónica y de radiofrecuencia son actualmente las máquinas de belleza más populares que trabajan para tensar, dar forma al cuerpo y antienvjecimiento. Es un reemplazo eficaz de todos los programas de cuidado facial y corporal de los salones de belleza. Además, son convenientes y fáciles de operar. Resuelve los problemas de manejo de la piel y el cuerpo para los amantes de la belleza. Este equipo no requiere inyección, ni medicación, ni operación, por lo que no tiene efectos secundarios. Se utiliza externamente durante todo el proceso y tiene un efecto inmediato. Las máquinas de RF calientan las capas más profundas de la piel estimulan las células de colágeno para que se vuelvan a formar en la dermis, aumentan la circulación sanguínea en la hipodermis, logrando así el estiramiento de la piel y la anti agregación.

Ventajas

1. Máquina de belleza 8 en 1 que trabaja tanto en el cuidado facial como corporal.
2. La quema de grasa ultrasónica reemplaza y trasciende la liposucción, brindando buenas noticias para el tratamiento de la obesidad.
3. Se pueden reemplazar varios cabezales de trabajo en diferentes partes de acuerdo con los diferentes requisitos.
4. La combinación perfecta de ultrasonido y radiofrecuencia resuelve el dilema de perder peso. Ayuda a perder peso mientras que al mismo tiempo mantiene la piel firme, aumenta la elasticidad de la piel, el metabolismo y, en última instancia, mejora la salud.
5. Adopción de la tecnología de vanguardia de quema de grasa por ultrasonidos.
6. Es adecuado para todo tipo de pieles.
7. Indoloro, siendo invasivo durante el proceso. Saltándose cualquier período de recuperación sin afectar ningún trabajo y planes de vida.
8. Sin consumo, bajo coste y rápida devolución.
9. Un rango de tratamiento más amplio y efectos más rápidos y visibles.
10. No genera irregularidades como, sangrado, hinchazón y estasis después del tratamiento.
11. El ultrasonido, el vacío y la radiofrecuencia tienen la liberación de energía del LED rojo, respectivamente. Pueden disolver la grasa y masajear al mismo tiempo que aceleran el metabolismo y esterilizan la piel. El efecto es notable con un mayor nivel de comodidad.

Lifting y reparación facial

Principios

Radiofrecuencia facial

La RF trabaja a través de los circuitos formados por electrodos en pareja. La frecuencia óptima del efecto biotermal de radiofrecuencia de 4 polos es de 3 MHz, y la velocidad máxima de cambio extremo es de 8 millones de partículas cargadas en los tejidos por segundo. En el cambio rápido de electrodos, el tejido dérmico resiste naturalmente la corriente de radiofrecuencia y genera energía térmica. Durante el proceso, la RF promueve el metabolismo y la proliferación del colágeno de la piel.

a través de un alto cambio de onda electromagnética, por lo tanto, se calienta la capa de la dermis de la piel, logrando así efectos como tensar, levantar, eliminar las arrugas, antienvjecimiento y suavizar la piel.

Efecto biológico


La radiofrecuencia puede sacudir millones de ondas de radio de alta frecuencia por segundo, penetrar en la epidermis, actuar directamente sobre la dermis, calentar profundamente las células de colágeno, estimular el crecimiento de las fibras de colágeno, de modo que tenga una gran cantidad de nuevo soporte de colágeno, haciendo que la piel se compacte y se vuelva elástica. Cada vez que entra energía en la piel, se siente una sensación temporal de calor. Esto significa que se ha estimulado el colágeno para producir fiebre, lo que resulta en un endurecimiento de la piel. Mientras se opera deslizándose, la onda de radiofrecuencia emitida por el cabezal terapéutico del sistema de ondas de superfrecuencia, bajo la protección fría de la epidermis, ha actuado sobre la dermis profunda a través de la epidermis, calentando rápidamente las moléculas de agua para producir energía biotermal segura. Cuando la fricción natural del tejido de colágeno se calienta a 45 °C ~ 60 °C, se encogerá inmediatamente y estimulará el crecimiento continuo del colágeno. Al mismo tiempo, el bioalentamiento puede acelerar eficazmente el flujo sanguíneo en los adipocitos y liberar ácidos grasos libres (ffa), lo que aumenta la disolución de la grasa superficial y logra el propósito de tensar y levantar la parte flácida del cuerpo.

Martillo frío

El martillo frío utiliza el principio del aire acondicionado. Se utilizan cerámicas especiales de obleas para absorber energía y refrigerar a -5 °C en un instante. El método de acumulación de calor físico producido por la absorción de energía de la oblea hace que un lado produzca calor hasta 40 grados. El ventilador descarga el exceso de energía térmica y consigue el efecto de temperatura constante y

congelación alternativamente. También promueve el metabolismo, alivia las reacciones alérgicas, encoge los poros, calma la piel, blanquea y suaviza la piel.

Efectos biológicos: utiliza principios de enfriamiento y calentamiento para tener los efectos correspondientes en la piel. Durante el proceso de enfriamiento, la temperatura de los tejidos se enfría, los vasos sanguíneos y las venas se contraen, la tasa metabólica se reduce, la actividad celular se inhibe, la sensibilidad de los nervios periféricos se reduce, teniendo así un efecto sedante y calmante, contrarrestando o reduciendo los síntomas de la reacción alérgica, como el enrojecimiento, hinchazón, y dolor, consiguiendo por tanto ciertos efectos, como calmar la piel, reducir el enrojecimiento y la hinchazón, encoger los poros, etc. Durante el proceso de calentamiento, calienta los tejidos y aumenta la temperatura, ajusta la circulación sanguínea, acelera el metabolismo y mejora la absorción.

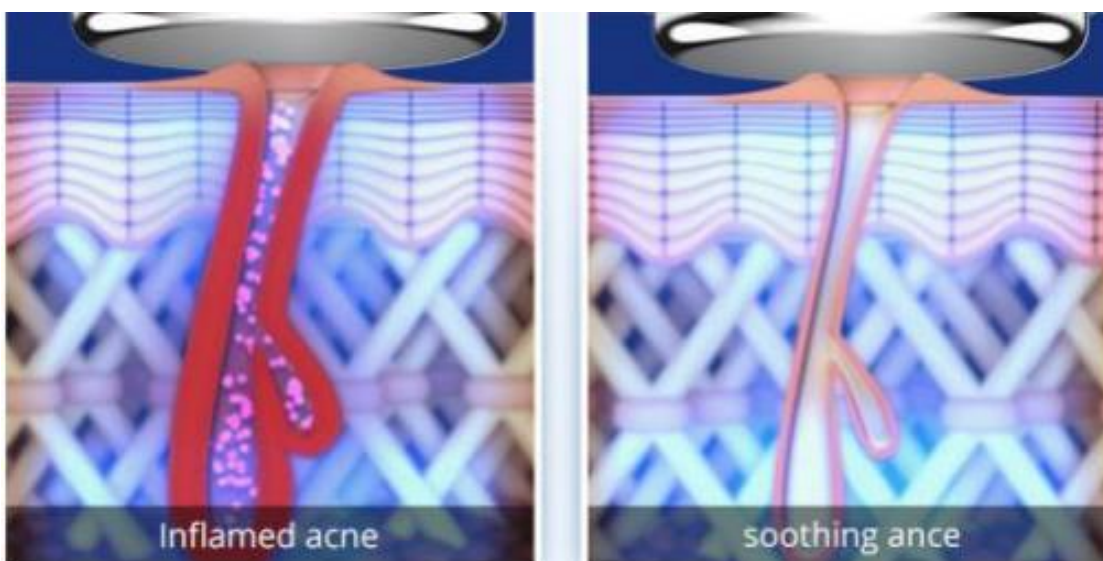

Tratamiento de fotones

La terapia de fotones LED utiliza el principio de la fotodinámica para activar las células profundas y estimula el metabolismo de la piel. Una vez que la luz es absorbida por la piel, la energía lumínica se transforma en energía intracelular, que expande y fortalece los microvasos y produce una reacción fotoquímica-reacción enzimática con la piel, aumentando la actividad de la catalasa y superóxido dismutasa (SOD), que sirven como "guardia" y "trabajador de limpieza" de células. Aumenta la degradación del trifosfato de adenosina (ATP), una fuente de energía celular. Aumenta el contenido de glucógeno y proteínas, promoviendo así el metabolismo y la síntesis celular. Para estimular el factor de crecimiento de fibras sintéticas alcalinas (BFGF) del cuerpo, la secreción del factor de crecimiento epidérmico (EGF), fabricando fibras de colágeno y aumentando la elasticidad, reordenando las fibras, bloqueando y eliminando la formación de melanina, acelerando el crecimiento celular y la circulación sanguínea, estimulando las células fibrosas. Produce colágeno, aumenta la elasticidad de la piel, repara la piel

envejecida, acné, atenúa las manchas, reafirma y alivia las quemaduras solares. Desempeña un papel importante en el cuidado de la piel, como matar bacterias para proporcionar un entorno adecuado.

Efecto biológico: mediante el principio fotodinámico, activa las células profundas y estimula el metabolismo de la piel. Después de que la luz es absorbida por la piel, la energía de la luz se convierte en energía celular, que puede relajar y fortalecer los micro vasos y producir reacciones fotoquímicas con la piel - reacciones enzimáticas, aumentando el contenido de glucógeno y proteínas, promoviendo así el metabolismo y síntesis de células.



Efectos

1. Mejora el enrojecimiento y la hinchazón de la cara, el acné y las alergias.
2. Deja una piel suave al mismo tiempo que la cuida.
3. Reduce los poros, mejora el enrojecimiento.
4. Aumenta la elasticidad de la piel.
5. Mejora la piel suave, flácida y arrugada.
6. Ayuda a la piel a absorber profundamente la nutrición y la mantiene.
7. Aumenta la resistencia de la piel, repara la piel frágil.
8. Acelera la circulación y el metabolismo en la parte inferior de la piel y haciéndola saludable.

Rango aplicable

1. Aquellos con tono de piel pálido y amarillento.
2. Aquellos con piel relajada y flácida.

3. Aquellos con ojeras, bolsas en los ojos, líneas finas, pliegues nasolabiales o granos en los ojos.
4. Aquellos con contorno facial difuso.
5. Aquellos con piel áspera, poros dilatados y secreción excesiva de sebo.
6. Aquellos que están bajo una exposición prolongada a la radiación ultravioleta en el lugar de trabajo.
7. Aquellos con piel relajada, flácida e inflamada después del parto.
8. Aquellos con piel sensible, acné y piel que a menudo presenta enrojecimiento e hinchazón.

Rango inaplicable

1. Aquellos que acaban de someterse a una cirugía plástica a la que se les ha implantado prótesis, materiales metálicos, etc.
2. Aquellos que han recibido recientemente ciertas inyecciones, como ácido hialurónico, inyección intradérmica, eliminación de arrugas o cirugía plástica.
3. Aquellos con hipertensión, enfermedades cardíacas, diabetes, tiroides grave y tumores malignos.
4. Aquellos que están teniendo una reacción alérgica, o personas con piel muy sensible o alérgica a los metales.
5. Aquellos con traumatismos o heridas en la piel.
6. Aquellos que están envejeciendo.
7. Aquellos en menstruación, embarazo, lactancia y recuperación quirúrgica.
8. Aquellos con enfermedades de la piel y enfermedades infecciosas.
9. Aquellos que no son realistas

Notas después de la operación

1. No se lave la cara con agua sobrecalentada en tres días (se recomienda agua tibia o fría).
2. Mejora la hidratación y la protección solar.
3. No se sumerja en aguas termales, saunas de vapor o haga ejercicio vigoroso, etc., dentro de los tres días.
4. Use mascarillas faciales al menos tres veces por semana.
5. Deben evitarse los alimentos picantes y grasos. Quedarse despierto hasta tarde, fumar y beber son prohibido. Coma más verduras, frutas y alimentos menos grasos.
6. Evite los alimentos que causen "3 altos" (presión arterial alta, colesterol alto y azúcar en sangre alto), alimentos menos grasos.

Anti-aging en ojos

Principios

Ojo RF

La RF trabaja a través de los circuitos formados por electrodos en pareja. Las ondas de radiofrecuencia penetran la piel directamente y producen energía térmica creada por una fuerte vibración de la resistencia del tejido (1 MHz). Durante el tratamiento, el dispositivo de RF estimula nuevo colágeno.

producción al calentar la hipodermis alrededor de los ojos, lo que ayuda a tensar la piel, eliminar las ojeras y las bolsas, tratar la cuperosis y las líneas finas.

Efectos

1. Alivia la fatiga ocular, elimina las ojeras, atenúa las bolsas de los ojos y los edemas.
2. Reduce las arrugas alrededor de los ojos y las patas de gallo.
3. Reduce las manchas oscuras y acelera la circulación sanguínea.
4. Acelera el metabolismo y previene la hiperpigmentación.
5. Complementa la nutrición de los ojos e hidratar la piel.
6. Suaviza la piel, levanta las esquinas de los ojos.

7. Acelera la circulación sanguínea alrededor de los ojos y ayuda a que la piel absorba los nutrientes de manera eficiente.

Rango aplicable

1. Pacientes con arrugas, líneas finas, bolsas y ojeras alrededor de los ojos.
2. Pacientes con piel seca, líneas secas y arrugas dinámicas.
3. Pacientes con ojos propensos a la fatiga y la sequedad.
4. Pacientes que con frecuencia se enfrentan a pantallas de computadora y teléfonos móviles.
5. Pacientes que a menudo se quedan despiertos hasta tarde y tienen ojeras.
6. Pacientes que a menudo permanecen en un lugar seco o caluroso.

Rango inaplicable

1. Pacientes que acababan de someterse a una cirugía plástica.
2. Pacientes con hipertensión, enfermedades cardíacas, diabetes, tiroides grave y tumores malignos.
3. Pacientes que están teniendo una reacción alérgica, o personas con piel muy sensible o alérgica a los metales.
4. Aquellos con traumatismos o heridas en la piel.
5. Aquellos que están sobrepasando.
6. Las embarazadas o convalecientes.
7. Aquellos con enfermedades de la piel y enfermedades contagiosas.

Notas después de la operación

1. Evite la exposición excesiva al sol. Se recomienda la protección solar.
2. Después de la operación, el área tratada está relativamente seca, se recomienda hidratación y protección solar.
3. Dentro de 1-3 días después de la operación, es mejor no usar alcohol, AHA u otros productos exfoliantes.
4. Evite lavarse la cara con agua sobrecalentada, vapor de sauna, aguas termales u otro ejercicio extenuante dentro de los 7 días posteriores a la operación.

5. Se recomienda el uso de humectantes y mascarillas para los ojos, preferiblemente 3 veces o más en las mascarillas para los ojos.

Tratamiento en papada

Principios

RF de cara

La onda de RF penetra directamente en la piel y genera energía por la acción de resistencia de la piel, lo que hace que la temperatura del fondo de la piel se eleve, calienta rápida y continuamente el tejido y promueve el crecimiento de colágeno en la piel. El principio es tensar el colágeno y estimular la proliferación de colágeno en la dermis y luego se utiliza para mejorar la tensión y la durabilidad en el tiempo. Después de 2 a 6 meses, el colágeno proliferará y se recombinará gradualmente, haciendo que la piel flácida o relajada esté tensa y elevada.

Lipo laser

El dispositivo láser para disolver grasa utiliza un láser rojo con una longitud de onda de 635 nm a 650 nm, que es un espectro visible. Esta longitud de onda de luz tiene un fuerte poder de penetración, que puede activar y reparar eficazmente las células grasas, penetrar la capa de grasa y disolver la grasa subcutánea mediante el calor. Su método de tratamiento es seguro, sin efectos secundarios ni dolor. Las pequeñas almohadillas láser se pueden operar en áreas pequeñas, como el mentón y los brazos.

Efectos

1. Mejora la papada y el metabolismo de las grasas.
2. Mejora la flacidez en la piel.
3. Mejora el contorno facial.

Rango aplicable

1. Pacientes con grasa acumulada en mentón y papada.
2. Pacientes con contorno facial vago y rostro redondo.
3. Pacientes con piel flácida y flacidez en el mentoniana

Rango inaplicable

1. Pacientes cuya barbilla haya sido sometida a una ligera cirugía plástica.
2. Pacientes con una herida en la barbilla, cuello o cara o que sean alérgicos.

3. Pacientes con enfermedades de la piel.
4. Pacientes con mucho acné en la barbilla.
5. Pacientes con enfermedad linfática o hipertiroidismo.
6. Pacientes que están envejeciendo.
7. Pacientes que estén embarazadas o en recuperación de una operación.

Notas después de la operación

1. Se recomienda usar protector solar.
2. Preste atención a la hidratación y al protector solar después del tratamiento.
3. Dentro de 1-3 días después de la operación, es mejor no usar alcohol, AHA u otros productos exfoliantes.
4. Evite lavarse la cara con agua sobrecalentada, sauna al vapor, aguas termales o ejercicio extenuante dentro de los 7 días posteriores a la operación.
5. Se recomienda el uso de esencias o cremas para el cuello.
6. Evite inclinar la cabeza durante un periodo de tiempo.

Anti-envejecimiento de cuello

Principios

RF de cara

El instrumento de RF puede lograr el efecto de tensar la piel, levantar la piel y dar forma a la cara. La frecuencia óptima del efecto biotérmico de radiofrecuencia es de 3 MHz, y la velocidad máxima de cambio extremo es de 8 millones de partículas cargadas en los tejidos por segundo. En el cambio rápido de electrodos, el tejido dérmico resiste naturalmente la corriente de radiofrecuencia y genera.

La onda de RF penetra directamente en la piel y genera energía por la acción de resistencia de la piel, lo que hace que la temperatura del fondo de la piel se eleve, calienta rápida y continuamente el tejido y promueve el crecimiento de colágeno en la piel. El principio es tensar el colágeno y estimular la proliferación de colágeno en la dermis y luego se utiliza para mejorar la tensión y la durabilidad en el tiempo. Después de 2-6 meses, el colágeno proliferará y se recombinará gradualmente, haciendo que la piel flácida o relajada se tense.

Efecto biológico

La radiofrecuencia puede sacudir millones de ondas de radio de alta frecuencia por segundo, penetrar en la epidermis, actuar directamente sobre la dermis, calentar profundamente las células de colágeno, estimular el crecimiento de las fibras de colágeno, de modo que tenga una gran cantidad de nuevo soporte de colágeno, haciendo que la piel más compacto y elástico.

El sistema de ondas de supe frecuencia, bajo la protección fría de la epidermis, ha actuado sobre la dermis profunda a través de la epidermis, calentando rápidamente las moléculas de agua para producir energía Bio Térmica segura. Cuando la fricción natural del tejido de colágeno se calienta a 45 °C ~ 60 °C, se encogerá inmediatamente y estimulará el crecimiento continuo del colágeno. Al mismo tiempo, el bio calentamiento puede acelerar eficazmente el flujo sanguíneo en los adipocitos y liberar ácidos grasos libres (ffa), lo que aumenta la disolución de la grasa superficial y logra el propósito de tensar y levantar la parte flácida del cuerpo.

Efectos

1. Reducir las líneas finas y las arrugas del cuello.
2. Mejorar la flacidez, aspereza y opacidad de la piel del cuello.
3. Apriete la piel y aumente la elasticidad de la piel.
4. Quite la papada.
5. Acelere la desintoxicación linfática y mejore la piel del rostro.
6. Prevenga las enfermedades del cuello y los linfáticos.

Rango aplicable

1. Pacientes con líneas finas y arrugas en el cuello.
2. Pacientes con piel de cuello floja e inelástica.
3. Pacientes con piel oscura y cetrina.
4. Pacientes que a menudo inclinan la cabeza.

Rango inaplicable

1. Pacientes que acaban de someterse a una cirugía plástica.
2. Pacientes con hipertensión, enfermedades cardíacas, diabetes, tiroides grave y tumores malignos.
3. Pacientes que están teniendo una reacción alérgica o personas con piel muy sensible.
4. Pacientes con traumatismos o heridas en la piel.
5. Mujeres embarazadas o convalecientes.
6. Pacientes con enfermedades de la piel y otras enfermedades contagiosas.

Notas después de la operación

1. Se recomienda usar protector solar. Mantén el cuello caliente.
2. Después de la operación, el área tratada está relativamente seca, se recomienda hidratación y protección solar.
3. Dentro de 1-3 días después de la operación, es mejor no usar alcohol, AHA u otros productos exfoliantes.
4. Evite el lavado facial con agua sobrecalentada, sauna al vapor, aguas termales o ejercicios extenuantes dentro de los 7 días posteriores a la operación.
5. Se recomienda hidratación y mascarilla para el cuello, se recomienda al menos 3 mascarillas a la semana con esencia o crema para el cuello.

Moldeamiento corporal


RF corporal

El instrumento de RF puede lograr el efecto de tensar la piel, levantar la piel y dar forma a la cara. La frecuencia óptima del efecto biotérmico de radiofrecuencia es de 3 MHz, y la velocidad máxima de cambio extremo es de 8 millones de partículas cargadas en los tejidos por segundo. En el cambio rápido de electrodos, el tejido dérmico resiste naturalmente la corriente de radiofrecuencia y genera energía térmica. La onda de RF penetra directamente en la piel y genera energía por la acción de resistencia de la piel, lo que hace que la temperatura del fondo de la piel se eleve, calienta rápida y continuamente el tejido y promueve el crecimiento de colágeno en la piel. El principio es tensar el colágeno y estimular la proliferación de colágeno en la dermis y luego se utiliza para mejorar la tensión y la durabilidad en

el tiempo. Después de 2 a 6 meses, el colágeno proliferará y se recombinará gradualmente, haciendo que la piel flácida o relajada esté tensa y elevada.

Efecto biológico

La radiofrecuencia puede sacudir millones de ondas de radio de alta frecuencia por segundo, penetrar en la epidermis, actuar directamente sobre la dermis, calentar profundamente las células de colágeno, estimular el crecimiento de las fibras de colágeno, de modo que tenga una gran cantidad de nuevo soporte de colágeno, haciendo que la piel más compacto y elástico. Cada vez que entra energía en la piel, se siente una sensación temporal de calor. Esto significa que se ha estimulado el colágeno para producir fiebre, lo que resulta en un endurecimiento de la piel. Mientras opera deslizándose, la onda de radiofrecuencia emitida por el cabezal terapéutico del sistema de ondas de súper frecuencia, bajo la protección fría de la epidermis, ha actuado sobre la dermis profunda a través de la epidermis, calentando rápidamente las moléculas de agua para producir energía biotérmica segura. Cuando la fricción natural del tejido de colágeno se calienta hasta $45^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$, se encogerá inmediatamente y estimulará el colágeno para que continúe creciendo. Al mismo tiempo, el bioalentamiento puede acelerar eficazmente el flujo sanguíneo en los adipocitos, liberar ácidos grasos libres (ffa), aumentando así la disolución de la grasa superficial y lograr el propósito de tensar y levantar la parte flácida del cuerpo.

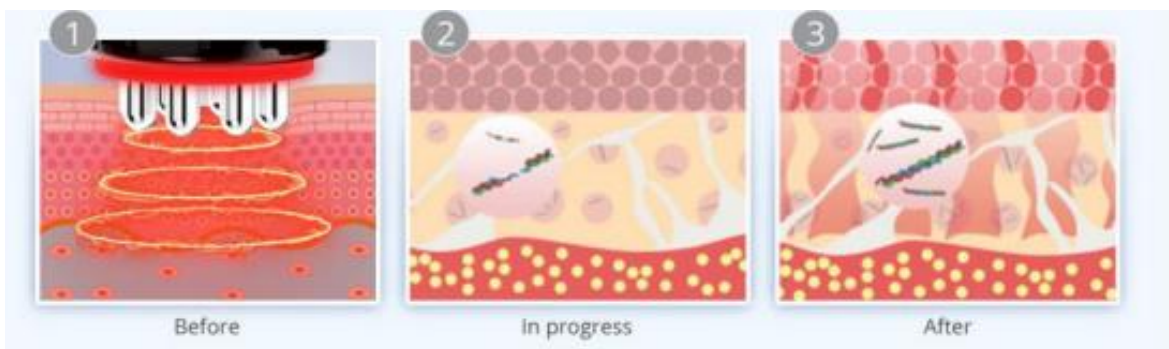

40K

Usando la onda de sonido con una frecuencia de 4 MHz emitida por la cabeza de onda de sonido fuerte que reúne ondas de sonido fuertes, los adipocitos humanos pueden producir un fuerte impacto y movimiento de fricción entre los adipocitos después de ingresar al cuerpo humano, lo que puede consumir efectivamente calor, agua y encoger los adipocitos. Además, cuando las ondas sonoras vibran, pueden hacer que los adipocitos sean más pequeños. Aparecerá una grieta fuerte, las células estallarán instantáneamente, los adipocitos se reducirán para lograr el efecto de eliminación de grasa.

Principio de cavitación del ultrasonido: Decenas de miles de burbujas diminutas, es decir, burbujas de cavitación, son producidas por la vibración del líquido. Estas burbujas crecen en la región de presión negativa formada por la propagación longitudinal de los ultrasonidos y se cierran rápidamente en la región de presión positiva, comprimiéndose y estirando así bajo presiones positivas y negativas alternas. Las burbujas se comprimirán hasta que estallen, lo que generará una enorme presión instantánea, generalmente de hasta decenas de MPa a cientos de MPa, y producirá fuertes vibraciones y ruido.

Ventajas: Solo apunta al tejido adiposo de baja densidad en una frecuencia específica y protege el tejido de alta densidad como el tejido vascular y nervioso.

Presión de vacío

Masajee la piel y los músculos con el cabezal de succión de presión negativa especial, que puede mejorar eficazmente el flujo de fluidos corporales y aumentar la actividad celular para lograr efectos como mejorar la elasticidad de la piel, acelerar la circulación sanguínea de la sangre capilar.

Elimina toxinas a través del drenaje linfático, mejora y reduce la aparición de manchas oscuras, hiperpigmentación y estasis de sangre. Hace una acción de amasado generada por el vacío.

La succión puede aumentar la actividad tisular de la piel y los músculos, ayudando así a reducir el tejido celular y aumentar la elasticidad del tejido cutáneo, de modo que tanto el adelgazamiento como el modelado se puedan completar al mismo tiempo. Además, el movimiento de presión negativa al vacío también puede estimular la superficie y el sistema nervioso simpático profundo, mejorar la sensibilidad de la piel. El proceso de succión y liberación de la presión del aire no solo puede mejorar el sistema capilar, sino también mejorar el flujo entre las venas más profundas y la red linfática, fortalecer los vasos sanguíneos y mejorar las venas varicosas.

Ventajas: rompe el modo de trabajo anterior único y simple de presión de aire negativa, usar diferentes modos para diferentes partes puede ser más eficiente y más efectivo, adelgazar, dar forma y nunca dañará el cuerpo humano. Diseño único de cabezal de función de RF. La presión es relativamente independiente pero complementaria al sistema metabólico en su conjunto, la RF tiene presión negativa, entre sí como un todo. En comparación con la RF de una sola etapa ordinaria puede ser más eficaz, más rápido y puede tener una remodelación del cuerpo más uniforme.

Efectos físicos del vacío

1. Capa de piel

La succión y liberación de presión de aire:

(1) Puede mejorar la fluidez de las células, aumentando así el movimiento de las células y puede tratar enfermedades relacionadas con la estasis sanguínea y el estancamiento de la sangre.

(2) Drenaje de ganglios linfáticos y venas.

Efectos: se descarga fluidos sobrantes.

2. Capa vascular

La succión y liberación de presión de aire:

(1) Mejorar la circulación sanguínea de los microvasos, no solo para el sistema capilar, sino también el flujo entre las venas más profundas y las redes linfáticas.

(2) Elimina el exceso de toxinas del cuerpo.

Efectos: Fortalecen los vasos sanguíneos, eliminan toxinas y alivian

3. Capa fibrosa

La succión y liberación de presión de aire:

Puede promover la combinación de dos efectos en diferentes tejidos (incluida la piel, los músculos, etc.).

(1) Repara el tejido celular, aumenta su actividad.

(2) Levanta y reaviva la elasticidad de la piel.

(3) Estimula la producción de colágeno óseo y mejora la tersura de la piel.

(4) Mejora la capacidad de soporte de oxígeno de la piel y aumenta el consumo de dióxido de carbono.

Efectos: rompe las fibras duras de la celulitis, hace la piel más elástica, para lograr el efecto lifting del cuerpo.

Disolución de grasa con láser

El dispositivo láser para disolver grasa utiliza un láser rojo con una longitud de onda de 635 nm a 650 nm, que es un espectro visible. Esta longitud de onda de luz tiene un fuerte poder de penetración, que puede activar y reparar eficazmente las células grasas, penetrar la capa de grasa y disolver la grasa subcutánea mediante el calor. Su método de tratamiento es seguro, sin efectos secundarios ni dolor.

Los niveles bajos de señales químicas de energía láser se envían a las células grasas para descomponer los triglicéridos almacenados en la capa de grasa del cuerpo en ácidos grasos libres y glicerol y liberarlos a través de los canales de la membrana. Los ácidos grasos y el glicerol se transportan a los tejidos que producen energía metabólica. La liberación de ácidos grasos es una respuesta natural cuando el cuerpo necesita utilizar las reservas de energía almacenadas, por lo que no hay una reacción antinatural en el cuerpo, ni afecta o daña las estructuras circundantes como la piel, los vasos sanguíneos y los nervios periféricos. Después de un período de terapia de ejercicio, se asegurará de que los ácidos grasos libres del cuerpo se eliminen por completo.

Efecto biológico

El LED utiliza un láser LED de 635 nm a 650 nm que calienta las células de grasa en la zona objetivo para que se descomponga. En un período de tiempo muy corto, la deposición de grasa solo es absorbida por los procesos metabólicos naturales de nuestro cuerpo y la descarga. En el proceso de operación, el láser sella los vasos sanguíneos pequeños, reduce significativamente las lesiones, introduce el área de tratamiento térmico, estimula la producción de colágeno, lo hace suave y terso y también logra el efecto de moldeamiento en el cuerpo deseado.

El láser actúa principalmente como un láser de baja energía (estimulación biológica) para llegar a la grasa en profundidad. Estimula las células biológicas e induce o fortalece una serie de reacciones fisiológicas al proporcionar la energía adecuada, incluida la promoción de la circulación sanguínea local, la regulación de la función celular, la mejora de la función inmunológica y la promoción del metabolismo celular. Puede al mismo tiempo reducir la grasa y dar forma al cuerpo. El poder de penetración del láser es muy fuerte y puede activar o reparar las células grasas de manera más eficaz. También puede penetrar la capa de grasa, calentar y disolver la grasa subcutánea. El método de tratamiento es seguro y no tiene efectos secundarios ni dolor.

Utilizando la última técnica de descomposición de grasa con láser no quirúrgico y no invasivo, se liberan bajos niveles de energía láser. Produce una especie de señales químicas en las células grasas que disolverán el trióxido trieno almacenado en el cuerpo en ácidos grasos libres, glicerina y moléculas de agua. Y esta es la reacción natural cuando se utilizan las reservas de energía que se necesitan. Los ácidos grasos libres se transportan al cuerpo a través del sistema linfático para

proporcionar energía al cuerpo, al igual que el cuerpo respondería cuando falta calor.



1. Moldeamiento de cintura y abdomen

Efectos

1. Estira la piel de la cintura y el abdomen.
2. Reduce la grasa abdominal y lumbar.
3. Atenúa las estrías, las líneas de obesidad y aumenta la elasticidad de la piel.
4. Acelera el metabolismo, alivia el estreñimiento y favorece la peristalsis intestinal.

Rango aplicable

1. Pacientes con grasa lumbar y abdominal o que tienen la piel flácida después del parto.
2. Pacientes que permanecen sentadas durante mucho tiempo o con cinturas poco ideales.
3. Pacientes con estrías debido a la obesidad y el embarazo.
5. Pacientes con estreñimiento u obstrucción de los meridianos abdominales.

Rango inaplicable

1. Aquellos con “3 Hs” (hipertensión, hiperglucemia, hiperlipidemia) y que padecen enfermedades cardíacas.
2. Pacientes gestantes, menstruación o lactancia.
3. Pacientes que acaben de ser sometidos a heridas quirúrgicas o convalecientes.
4. Pacientes con epilepsia y diabetes e hipertiroidismo graves.
5. Pacientes con tumores malignos, hemofilia o sangrado severo.
6. Pacientes con enfermedades de la piel y enfermedades infecciosas.
7. Pacientes con enfermedades ginecológicas graves.
8. Pacientes cuyas enfermedades ginecológicas están siendo tratadas

Notas después de la operación

1. Evite usar blusa corta o cualquier cosa que exponga la cintura y el abdomen, así como el ambiente frío y ventoso.
2. Evite comer o beber en exceso. Sin alcohol, sin alimentos picantes y grasosos. Se debe evitar quedarse despierto hasta tarde. Se recomienda beber agua tibia.
3. Mantenga el abdomen caliente. Se recomienda bañarse después de 4-6 horas posterior al tratamiento.
4. Recomiende a su paciente evitar el sauna de vapor, las aguas termales o el ejercicio extenuante dentro de los 7 días posteriores a la operación.
5. Antes de acostarse por la noche, puede frotar su abdomen en el sentido de las agujas del reloj con las manos, para mejorar el efecto de la pérdida de peso y el metabolismo.

2. Modelado de senos

Principios

RF corporal

El efecto de calor de RF produce ondas de radiofrecuencia específicas en una profundidad específica de la piel subcutánea, que actúa directamente sobre la dermis a través de la epidermis de la piel, calentando así el tejido, promoviendo el catabolismo de la grasa subcutánea y estimulando la proliferación y reorganización de las fibras de colágeno y elastina. Con la continua regeneración y reordenación

del colágeno en la dermis, se puede lograr. Deje que la piel flácida sienta el efecto de levantarse y compactarse inmediatamente después del tratamiento. Al mismo tiempo, el masaje puede promover la circulación sanguínea de los senos, acelerar la circulación sanguínea, dragar los coágulos de sangre congestionados y el limo, y liberar grasa en el pecho en condiciones de vibración. Al mismo tiempo, se absorben más nutrientes en los senos, lo que no solo previene la hiperplasia lobular atípica y el cáncer de mama, sino que también le permite tener senos naturales, saludables, hermosos y fuertes.

Efectos

1. Ajuste el tipo de pecho y reduzca el pecho accesorio.
2. Alivia los nódulos torácicos, la hiperplasia leve, aliviar el dolor mamario menstrual.
3. Reduce la expansión del pecho.
4. Alivia la menstruación irregular y reduce las manchas faciales o la piel sin elasticidad.
5. Alivia la atrofia mamaria posparto, la relajación mamaria, la obstrucción de los conductos mamarios

Rango aplicable

1. Pacientes con mala forma de los senos y senos accesorios.
2. Pacientes con nódulos en el pecho, leve hiperplasia y dolor en el pecho durante menstruación.
3. Pacientes con grasa en el pecho extendida.
4. Pacientes con inmunidad baja.
5. Pacientes con menstruación irregular y manchas faciales o cuya piel sea inelástica.
6. Pacientes con glándulas mamarias mal desarrolladas, atrofia mamaria posparto, relajación mamaria, obstrucción de los conductos mamarios

Rango inaplicable

1. Pacientes con enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, diabetes mellitus, función de coagulación anormal y función de órganos vitales deteriorada.
2. Pacientes que son usuarios a largo plazo o continuos de anticoagulantes, vasodilatadores, corticosteroides y otros fármacos.
3. Pacientes con lesiones infecciosas en la piel del pecho.
4. Pacientes con fibroma o quiste torácico proliferativo severo.
5. Pacientes en embarazo y lactancia.

Notas después de la operación

1. Recomiende que mantenga la temperatura de su piel caliente y beba más agua tibia.
2. Recomiende usar ropa interior cómoda y con estilo. No presione su pecho con fuerza.
3. Recomiende al paciente que evite el frío y que se Bañe después de 4-6 horas.
3. Modelado de brazos

Efectos

1. Estimula la hiperplasia de colágeno en la parte inferior de la piel para darle forma y reafirmarla.
2. Mejora la piel flácida.
3. Mejora los brazos flácidos y los brazos gruesos.
4. Calma y reafirma la piel flácida.
5. Acelere la circulación sanguínea y los canales de dragado y colaterales

Rango aplicable

1. Pacientes con brazos gruesos y quieren verse mejor con ropa.
2. Pacientes con brazos temblorosos y flácidos.
3. Pacientes con piel flácida en los brazos.

Rango inaplicable

1. Pacientes que acaban de someterse a una cirugía plástica.
2. Pacientes con hipertensión, enfermedad cardíaca, diabetes, glándula tiroides grave, tumor maligno, etc.
3. Pacientes que se encuentran en período alérgico y tienen una piel muy sensible.
4. Pacientes con traumatismo o corte en la piel.
5. Pacientes de la tercera edad.
6. Pacientes que están embarazadas y se están recuperando de una cirugía.
7. Pacientes con enfermedades de la piel y enfermedades infecciosas.

Notas después de la operación

1. Mantener caliente después de la operación. No coma alimentos fríos.
2. Dúchese en 4-6 horas.
3. Beba mucha agua tibia para mantenerse hidratado.
4. Rechace comer en exceso o quedarse despierto hasta tarde.
5. Evite la sauna, las aguas termales o el ejercicio extenuante dentro de una semana después de la operación.

4. Moldeamiento de espalda

Efectos

1. Ayuda a aliviar el dolor de hombros y espalda y mejora el bulto en la parte posterior del cuello.
2. Draga y mejora los canales y colaterales.
3. Incrementa la circulación sanguínea y el metabolismo.
4. Mejora el suministro de sangre a la cabeza y el sueño.
5. Regula las funciones de las vísceras y fortalece el organismo.
6. Reafirma la piel y previene la flacidez.
7. Reduce el exceso de grasa en la espalda y da forma.

Rango aplicable

1. Pacientes con dolor de hombros y espalda y rigidez en el cuello.
2. Pacientes que padezcan de insomnio, ensoñaciones y leve pérdida de memoria.
3. Pacientes que son propensos a la fatiga, la somnolencia y la mala circulación de la sangre.
4. Pacientes con espalda gruesa y que deseen verse mejor con ropa.
5. Pacientes que tengan un bulto en la nuca.

Rango inaplicable

1. Pacientes con implantes metálicos en el cuerpo, como stents y marcapasos, o alérgicos al metal.
2. Pacientes en gestación, en periodo de menstruación y la lactancia.
3. Pacientes cuya herida quirúrgica está cicatrizando o convaleciente
4. Pacientes que tienen “tres H”, enfermedades cardíacas, epilepsia y diabetes e hipertiroidismo graves.
5. Pacientes con tumor maligno y hemofilia o sangrado severo.
6. Pacientes con enfermedades de la piel y enfermedades infecciosas.
7. Pacientes que presentan demasiada debilidad.
8. Pacientes alcoholizados, llenos, vacíos, sedientos y con exceso de trabajo.

Notas después de la operación

1. Recomiende al paciente mantenerse en una temperatura tibia, evite el aire frío.
2. Recomiende a su paciente en 4-6 horas después de la operación.
3. Recomiende a su paciente que evite quedarse despierto hasta tarde, que no beba y coma en exceso.
4. Recomiende a sus pacientes evitar los alimentos crudos, fríos y picantes y que duerma lo suficiente.
5. Recomiende que evite desnudar los hombros para mantener una temperatura tibia en el area tratada.

Efectos

1. Mejore la circulación sanguínea y acelere el metabolismo.
2. Mejorar el dolor menstrual, la menstruación irregular, la leucorrea anormal y otras enfermedades femeninas.
3. Mejore la calidad del sueño, mejore la función sexual femenina y apriete la vagina.
4. Active la función de nido cálido, estimule la secreción de glándulas y aumente los sentimientos entre marido y mujer.
5. Hace que la tez se ruborice, se desvanezcan las manchas de color y vuelva a su estado joven.
6. Dar forma a las caderas, mejorar la flacidez y la expansión hacia afuera de las caderas, tensar la piel y aumentar la elasticidad.

5. Moldeamiento de glúteos

Los gluteos están ubicadas en el medio del cuerpo humano y son el centro clave del qi del meridiano y la operación de la sangre. Son el interruptor principal de los seis meridianos y también el puente que conecta el jiao qi superior y el funcionamiento de la sangre del jiao qi inferior del cuerpo humano. Son el factor importante de la gestión corporal cuya curva S aumenta el encanto femenino.

Efectos

1. Mejora la circulación sanguínea y acelere el metabolismo.
2. Mejora el dolor menstrual, la menstruación irregular, la leucorrea anormal y otras enfermedades femeninas.
3. Mejora la calidad del sueño, mejore la función sexual femenina y apriete la vagina.
4. Activa la estimulación de la secreción de glándulas.
5. Hace que la tez se ruborice, se desvanezcan las manchas de color.
6. Da forma a las caderas, mejora la flacidez y la expansión hacia afuera de las caderas, tensa la piel y aumenta la elasticidad.

Rango aplicable

1. Pacientes con caderas caídas y acumulación de grasa.
2. Pacientes con estrías inducidas por obesidad y obesidad.
3. Pacientes cuya forma de glúteos no es atractiva, expansión plana y suave hacia afuera.
4. Pacientes con caderas frías y frescas con baja temperatura de la cadera.
5. Pacientes con dismenorrea, menstruación irregular, inflamación ginecológica y otros problemas.
6. Pacientes con niveles reducidos de estrógeno y una vida sexual deficiente.

Rango inaplicable

1. Pacientes que se encuentran en recuperación de la menstruación, en gestación, en lactancia y operación.
2. Pacientes con hipertensión, enfermedad cardíaca, diabetes, glándula tiroides grave, tumor maligno, etc.
3. Pacientes con enfermedades de la piel, pacientes con enfermedades infecciosas y período sensible a la piel.
4. Pacientes con heridas durante la recuperación de la cirugía.
5. Pacientes que tengan reacción alérgica o sean muy sensible.
6. Pacientes que acaban de someterse a una liposucción.
7. Pacientes que están demasiado envejecidos.

Notas después de la operación

1. Recomiende a su paciente mantener sus caderas en una temperatura tibia y que evite usar minifaldas y pantalones cortos.
2. Recomiende a su paciente ducharse en 4-6 horas después de la operación.
3. Recomiende a su paciente que beba mucha agua caliente para evitar el aire frío.
4. Recomiende que evite quedarse despierto hasta tarde, beber y comer en exceso.
5. Recomiende que evite comer alimentos crudos, fríos y picantes y duerma lo suficiente.

6. Coménteles a su paciente que debe evitarse la sauna de vapor, las aguas termales o el ejercicio extenuante dentro de los 7 días posteriores a la operación.

6. Modelado de piernas

Efectos

1. Tensa la piel y evita la flacidez.
2. Estimula la regeneración del colágeno y elimina la de grasa.
3. Aumenta la circulación de las piernas, promueve la desintoxicación y acelera el metabolismo.
4. Promueve la circulación sanguínea y elimina la estasis sanguínea, draga canales y colaterales y previene las venas varicosas.
5. Elimina el exceso de grasa que sobresale en las piernas.

Rango aplicable

1. Pacientes con mala circulación de miembros inferiores, edemas y personas obesas.
2. Pacientes que tienen baja inmunidad, sienten malestar, dolor en todo el cuerpo y son propensos a los resfriados.
3. Pacientes con estreñimiento y piel áspera y flácida.
4. Pacientes cuyos canales y colaterales de la linfa en las piernas están bloqueados y la proporción de las piernas es pobre.

Rango inaplicable

1. Pacientes que se encuentran en recuperación de la menstruación, el embarazo, la lactancia y la operación.
2. Pacientes con hipertensión, enfermedad cardíaca, diabetes, glándula tiroides grave, tumor maligno, etc.
3. Pacientes con enfermedades de la piel, pacientes con enfermedades infecciosas y período sensible a la piel.
4. Pacientes con heridas durante la recuperación de la cirugía.
5. Pacientes con tumores y venas varicosas graves.

6. Pacientes con piel alérgica y muy sensible.
7. Pacientes que acaban de someterse a una liposucción.
8. Pacientes que están demasiado envejeciendo.
9. Pacientes que estén embarazadas o se estén recuperando de una cirugía.

Notas después de la operación

1. Mantener la zona tratada caliente después de la operación. Recomiende a su paciente no comer alimentos fríos.
2. Se recomienda ducharse en 4-6 horas posterior a la operación.
3. Recomiende a su paciente beber agua tibia para reponer agua y acelerar el metabolismo.
4. Recomiende a su paciente que rechace comer en exceso o quedarse despierto hasta tarde.
5. Recomiende que evite el sauna, las aguas termales o el ejercicio extenuante durante 7 días después de la operación.
6. Use pantalones cuando haya terminado. Recomiende a su paciente que evite los pantalones cortos y faldas cortas.

Parámetros técnicos

40K Unoisetion Cavitation 2.0

Área de tratamiento del mango: medida corporal del tratamiento

Superficie: 38cm²

Frecuencia de ultrasonidos: 40 kHz máx.

Potencia de salida: 25 W

Mango de vacío Sextupolar 3D SMART RF con fotón

Área de tratamiento: Cuerpo

Medida Área de Tratamiento: 30cm²

Max. Potencia de salida: 50 W

Frecuencia de SMART 3D RF: 1MHz

Profundidad de trabajo de RF: 3,7 mm

Longitud de onda del fotón rojo: 650nm luz infrarroja

Mango de RF inteligente cuadrupolar 3D con fotón

Área de tratamiento: Cara

Medida Área de Tratamiento: 9.6cm²

Max. Potencia de salida: 20 W

Frecuencia de SMART 3D RF: 1MHz

Profundidad de trabajo de RF: 3,5 mm

Longitud de onda del fotón rojo: 650nm luz infrarroja

Mango bipolar 3D SMART RF con fotón rojo

Área de tratamiento: Rostro / Ojos alrededor

Medida Área de Tratamiento: 4cm²

Max. Potencia de salida: 10 W

Frecuencia de SMART 3D RF: 1MHz

Profundidad de trabajo de RF: 2,2 mm

Longitud de onda del fotón rojo: luz roja de 650 nm

Pads de lipolaser

Área de tratamiento: Cuerpo

Medida Área de Tratamiento: 75cm²

Max. Potencia de salida: 10 * 5 mw

Longitud de onda del láser Lipo: 650nm

Pads de lipolaser pequeños

Área de tratamiento: brazo, pierna

Medida Área de Tratamiento: 12cm²

Max. Potencia de salida: 2 * 5 mw

Longitud de onda del láser Lipo: 650 nm

Mango Bio Microcorriente

Área de tratamiento: Cara

Frecuencia de microcorriente: 50uA ~ 1000uA

Poder: 12W

Longitud de onda de la luz roja: 650 nm rojo

Área de tratamiento con martillo frío y caliente:

Medida ilimitada del área de tratamiento: 6cm²

Sistema de enfriamiento: Air Max.

Temperatura máxima: 43 °C

Temperatura mínima: -5 °C

3. Precauciones de seguridad

Los pacientes con los siguientes síntomas deben tener cuidado al utilizar este instrumento. Consulte a un médico o un profesional antes de utilizar el instrumento. Los detalles son

como sigue:

1. Pacientes en periodo de gestación o en período de lactancia.
2. Pacientes con enfermedades del corazón o que están equipados con marcapasos.
3. Pacientes cuyas heridas no han sanado y que se están recuperando de la operación.
4. Pacientes con epilepsia, diabetes severa e hipertiroidismo.
5. Pacientes con tumor maligno, hemofilia o sangrado severo.
6. Pacientes con enfermedades de la piel y enfermedades infecciosas.
7. Recomiende a su paciente que evite llevar joyas de metal durante el tratamiento.
8. Recomiende a su paciente que evite el uso alrededor de rellenos de metal, plástico o silicona.

4. Qué hacer y qué no hacer

1. El enchufe con clavija de conexión a tierra debe usarse antes de usar el instrumento y la toma de corriente del instrumento esté debidamente conectada a tierra.
2. Asegúrese de que el voltaje del instrumento sea el adecuado. Si el voltaje de la fuente de alimentación local no es estable, sugerimos que el usuario agregue un regulador de voltaje con la potencia correspondiente entre la red y el instrumento.
3. Para garantizar el efecto del tratamiento y la vida útil normal del instrumento, utilice las piezas especificadas proporcionadas o sugeridas por el fabricante original.
4. El instrumento no debe colocarse en lugares húmedos o cerca de fuentes de agua, y no debe colocarse directamente.
5. No coloque el instrumento cerca de una fuente de calor fuerte, ya que esto puede afectar la vida y el uso normal.
6. Antes del tratamiento, retire primero todos los objetos metálicos del cuerpo, para evitar condiciones inesperadas e influir en el efecto curativo.

7. No use el dispositivo en los ojos, tiroides, paratiroides, testículos, abdomen de mujeres embarazadas y marcapasos.
8. Los pacientes que padecen una enfermedad deben consultar con un médico y obtener el permiso del médico antes de usar.
9. Apague el interruptor de encendido del dispositivo y asegúrese de que la fuente de alimentación total del dispositivo esté apagada antes de que el personal se vaya después del uso diario, para garantizar la seguridad de los productos eléctricos.
10. Utilice el dispositivo o capacite a los operadores del dispositivo siguiendo estrictamente las instrucciones del manual del usuario.
11. Cuando tome otros medicamentos para bajar de peso, se recomienda dejar de tomarlos durante 1 a 2 meses antes del tratamiento. Se recomienda prolongar el curso del tratamiento si desea perder peso de inmediato.
12. No utilice el instrumento con el estómago vacío. Después de una comida completa, espere al menos 1 hora antes de un curso de pérdida de peso.
13. Durante el funcionamiento, el instrumento debe estar en pleno contacto con la piel para evitar un calentamiento desigual o quemarse.
14. Empiece desde el nivel de energía más bajo y sume lentamente.
15. Al usar este dispositivo, las partes operativas deben mantenerse húmedas y debe evitarse la piel seca.
16. Limpie el instrumento con solución salina normal (no use alcohol etílico) después de la operación para asegurar su limpieza e higiene y prolongar su vida útil.
17. Durante la operación, la manija de operación no debe permanecer en la piel por más de 3 segundos, necesita moverse y operar.
18. Después de comenzar, el instrumento debe entrar en contacto con la piel completamente, no trabajar sin entrar en contacto.
19. Al usar las almohadillas láser, toda la superficie de las almohadillas láser debe estar en contacto completo con la piel, no solo en un área pequeña.
20. Las almohadillas láser se pueden usar por separado, fíjelas en el área de operación, configure la energía, cada tratamiento toma 20-30 min. Tiene un mejor efecto con masaje, RF y dispositivo de vacío acompañado de RF.
21. La sonda 40K no se puede utilizar en la cabeza, el pecho, los senos, los huesos, el corazón y la espalda.

5. Solución de problemas y soluciones

1. ¿No se puede iniciar el instrumento, pero la luz de la tecla en la parte posterior del instrumento no funciona?

A. Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado a una toma de corriente válida.

B. Si el tubo del fusible en la parte posterior del instrumento está suelto o quemado.

2. ¿No hay salida de RF del instrumento?

A. Compruebe si el enchufe que conecta el mango del instrumento y el cuerpo está bien conectado.

B. Compruebe si se ha limpiado el área de tratamiento. Los productos de aceite esencial de grasa o aceite pueden causar un mal contacto entre el mango de tratamiento del instrumento y el cuerpo humano, lo que resulta en una ausencia de radiofrecuencia.

3. ¿Salida de RF debilitada?

A. Compruebe si el enchufe que conecta el mango del instrumento y el cuerpo está bien conectado.

B. Compruebe si la grasa no conductora y otras sustancias están manchadas en el mango de tratamiento, lo que provocará un mal contacto y debilitará la salida.

C. Compruebe si el producto utilizado es el producto adaptable especificado por el instrumento.

4. ¿Sin succión o muy poca succión?

A. Apague el instrumento y verifique el elemento de filtro especialmente utilizado para el instrumento, que puede necesitar ser reemplazado. B. Compruebe el anillo de goma del tapón del mango, ya que el anillo de goma puede estar desgastado y provocar fugas de aire.

C. Compruebe si la copa del filtro de aceite fuera del filtro está apretada y si el anillo de goma está desgastado. Es posible que las fugas de aire en esta posición provoquen una presión de aire deficiente.

D. Si los métodos anteriores no pueden solucionar el problema, comuníquese con el distribuidor del instrumento para obtener ayuda.

5. ¿Puedo iniciar el instrumento, pero la pantalla muestra el mensaje de error?

A. Desenchufe el cable de alimentación detrás del instrumento y espere aproximadamente 1 minuto antes de reiniciar el instrumento.

B. Si los métodos anteriores no se pueden manejar, comuníquese con el distribuidor del instrumento para obtener ayuda.

6. Preguntas frecuentes

1. P: ¿Cuánto tiempo puedo empezar a ver los resultados del tratamiento con RF?

R: En circunstancias normales dentro de ese día o una semana. El tejido de colágeno de la piel se calienta y produce contracciones, y obviamente puede sentir la piel tensándose. Debido a que la radiofrecuencia funciona estimulando el tejido subcutáneo y provocando una regeneración sostenible del colágeno, cuanto más lo haga, más efectos visibles obtendrá.

2. P: ¿La RF es dañina para la piel?

R: El tratamiento con RF se incluye en la categoría de operación no quirúrgica. Estimula la regeneración del colágeno en la base de la piel y acelera el metabolismo, por lo que no daña la piel. El enrojecimiento parcial y la fiebre es el fenómeno normal de la circulación sanguínea acelerada y se resolverá por uno mismo después de un momento, por lo que no hay necesidad de preocuparse.

3.P: ¿Cuánto tiempo dura el tratamiento reafirmante corporal?

R: El tiempo de una operación es de 60 minutos. Combinaremos técnicas e instrumentos profesionales para lograr.

4.P: ¿Cuáles son todas las funciones de este instrumento?

R: disuelve la grasa, da forma al cuerpo, suaviza la piel, reafirma, y levanta. Se puede operar en todo el cuerpo. En términos de cuidado facial, puede dar contorno a la cara, aliviar las arrugas y eliminar la flacidez en la piel. En términos de cuidado del cuerpo, puede reducir la grasa regional y construir la curva S, promover el metabolismo y la desintoxicación de todo el cuerpo. Mientras tanto, también puede mejorar las funciones de las vísceras y regular la sub-salud del cuerpo.

5.P: ¿Cuál es mejor en términos de pérdida de peso, liposucción o esta máquina?

R: El principio de la liposucción es succionar el exceso de grasa en una parte del cuerpo a través del método de succión con presión negativa, para lograr el propósito de una rápida pérdida de peso en algunas partes del cuerpo. Consigue resultados rápidos, requiere anestesia, período de recuperación. Se incluye en la categoría de

operación quirúrgica y conlleva riesgos. Sin embargo, nuestra máquina está libre de riesgos y no tiene efectos secundarios. Mientras pierde peso, puede estimular la regeneración del colágeno para levantar y tensar la piel. Al levantar, también puede dar forma a curvas perfectas y acentuar el encanto natural de la mujer.

6.P: ¿Experimentaré un rebote después de la operación?

R: Los ultrasonidos funcionan al disolver la grasa para reducir el peso y no son propensos a rebotar. Porque lo que se disuelve mediante el tratamiento ultrasónico es grasa, no agua. La formación de grasa necesita un período de tiempo más largo para acumularse, por lo que no es propensa a rebotar.

7.P: ¿Necesito estar a dieta?

R: Preste atención a lo que come. Porque la radiofrecuencia y el tratamiento ultrasónico terminan con una explosión adiposa y un metabolismo acelerado. Es mejor evitar comer alimentos picantes, aceitosos o fritos para evitar afectar el metabolismo regular. Además, el ejercicio adecuado y la sudoración ayudan con el proceso, de manera que la pérdida de peso también será más visible.

8.P: ¿Tiene efectos secundarios en el cuerpo?

R: El tratamiento de belleza por radiofrecuencia no es invasivo y, hasta ahora, es el método más seguro y eficaz para eliminar las arrugas y dar forma al cuerpo. En general, los efectos secundarios no aparecerán. Un pequeño número de personas puede experimentar enrojecimiento o hinchazón transitorios que desaparecen después de unas horas. Las personas con piel seca pueden experimentar atrofia después del tratamiento inicial. La piel perderá humedad debido al calor de RF. Sin embargo, la piel se volverá tersa al comienzo de la regeneración del colágeno y estos síntomas desaparecerán después de tres días. No tiene efectos secundarios sobre la salud.

9.P: ¿Se puede utilizar un instrumento de RF para dar forma al pecho?

R: A medida que aumenta la edad y el período de fisiología femenina, estado de sub-salud, gravedad, estimulación durante la lactancia, una gran cantidad de pérdida de nutrición ... Todo lo anterior causará pérdida de colágeno, disminución del flujo sanguíneo, tejido elástico dañado, ligamento flácido glándula y senos prolapsados. A través de la conducción de energía de RF, se puede promover la proteasa de colágeno para reparar el tejido elástico y las glándulas de los ligamentos, logrando así el efecto de levantar y dar forma al pecho.

10. P: ¿Se puede operar el ultrasonido en todo el cuerpo?

R: La cavitación ultrasónica rompe las células grasas y provoca una interrupción mecánica de la membrana de las células grasas. Las células grasas licuadas luego se eliminan por vías metabólicas. Nuestro corazón es un órgano hueco y sensible a las ondas sonoras de alta frecuencia. Reflejo de ida y vuelta ocurren debido al hecho

de que el tejido muscular y la sangre en el corazón no conducen las ondas sonoras de la misma manera. La fuerza refleja puede separar las válvulas cardíacas de los músculos cardíacos. Si se dirige al ojo, puede provocar desprendimiento de retina. En una palabra, evite el área de los ojos y el corazón cuando use un dispositivo de belleza ultrasónico. (También se recomienda no usarlo en la cintura, la espalda y el pecho).

11.P: ¿El ultrasonido tiene efectos secundarios en el cuerpo humano?

R: La máquina de belleza ultrasónica no requiere cirugía, apertura ni anestesia, por lo que no es invasiva. Se basa en el ultrasonido (onda de sonido mecánica): explosión de grasa a través de la cavitación, enfoque por ultrasonido. Y los resultados son aplastamiento de grasa, disolución de grasa, reafirmación de la piel y esculpido del cuerpo, respectivamente. Solo se dirige a las células grasas de baja densidad mientras deja intactos los tejidos de alta densidad como los vasos sanguíneos, por lo que no tiene efectos secundarios en el cuerpo humano. Puede parecer que se produce un leve tinte durante el tratamiento, que está dentro del rango normal, por lo que no hay necesidad de preocuparse.

12.P: ¿Por qué ocurre el zumbido en el oído?

R: Es porque el ultrasonido viene con una vibración de alta frecuencia, que puede llegar hasta los 20 kHz. También penetra profundamente en las capas de grasa de la piel, que podrían llegar hasta 20 mm por debajo de la epidermis. Los ultrasonidos intensifican mucho y causan una fricción de alta velocidad entre las células grasas, lo que hace que estallen y se calienten y, finalmente, se emulsionen. Y durante el proceso, la ecografía puede provocar microvibraciones en el tejido que nos hacen sentir como un “zumbido”.

13.P: ¿Qué es el colágeno?

R: El colágeno es una especie de sustancia macromolécula biológica, una especie de proteína fibrosa blanca, opaca y no ramificada. Puede complementar la nutrición que necesitan todas las capas de la piel, mejorar la actividad del colágeno en la piel, retener la humedad, nutrir la piel, retrasar el envejecimiento, embellecer, aliviar la relajación facial, proporcionar nutrientes para el cabello, etc. El colágeno es un nutriente que el cuerpo humano debe reponer para retrasar el envejecimiento. Con el crecimiento de la edad, el colágeno se irá perdiendo gradualmente. A la edad de 20 años, las mujeres han comenzado a envejecer, el colágeno disminuye gradualmente. A la edad de 25 años, la pérdida de colágeno alcanza su punto máximo. A los 40 años, el contenido es menos de la mitad del que se tiene a los 18. Es la pérdida de colágeno y agua lo que provoca las arrugas en el rostro de los ancianos. La rotura de las fibras de colágeno y la malla elástica provocará que el tejido de la piel se oxide, se atrofie y se colapse. La piel estará seca, arrugada, flácida e inelástica, etc. Por lo tanto, para retrasar el envejecimiento, el colágeno

14. P: ¿Por qué necesito el mantenimiento de los senos?

R: Los ganglios linfáticos del seno ocupan el primer lugar entre otras partes del cuerpo, lo que también conduce a la acumulación de toxinas con mucha facilidad, y el ritmo de vida urbano es muy rápido ahora, la presión de trabajo es muy grande, lo que puede provocar hiperplasia de diferentes niveles. Dice el refrán que el pecho es la cuna de los hijos, el jardín de la mujer, ¡el símbolo de la identidad femenina! El mantenimiento de los senos puede hacer que su figura sea más hermosa, agregar puntajes para todo su temperamento, ¡por lo tanto, la frecuencia de giro de la cabeza aumenta 10 veces sin duda! ¡La buena figura y el temperamento también asegurarán la lealtad del esposo! La evolución del cáncer de mama: leche materna residual, secreciones, toxinas, nódulos y bloqueos, hiperplasia lobulillar, hiperplasia ductal, hiperplasia de mama, obstrucción del conducto y fibroma de adherencia, quiste de mama, cáncer de mama.

15.P: ¿Por qué necesito mantenimiento de cadera?

R: Porque puede ayudar al sistema linfático del cuerpo a descargar veneno, mejorar la enfermedad ginecológica y evitar el daño causado por el bloqueo de glúteos. La impracticabilidad de la cadera seguramente trae consigo problemas ginecológicos. Lo que hay dentro de las nalgas es la cavidad pélvica, el intestino. Conecta daimai, vértebra lumbar, nervio ciático desde arriba, útero ovario, adenexa uterina al frente, ano, vagina, linfático inguinal desde abajo. Si sufre de compresión de los canales de los meridianos shangjiao y xiaojiao, la cadera sería más vulnerable al frío, la humedad y la estasis de sangre. Cuando la cadera se ve afectada por el frío, puede causar una contracción de los meridianos de la cadera, dismenorrea, menstruación irregular, color oscuro de la menstruación, coágulos, flujo sanguíneo disuadido y canales meridianos. También afecta la Fertilidad.



16.P: ¿Cómo se desintoxica la presión negativa?





R: La presión negativa puede congestionar los capilares, estimular las células para aumentar la vitalidad. La succión y liberación de presión durante la operación puede hacer que los poros locales continúen abriéndose y cerrándose, por lo tanto, promueve la respiración de la piel, aumenta la cantidad de oxígeno de la piel y acelera la eliminación de desechos. Por lo tanto, logra los efectos de promover el qi y la circulación sanguínea, disipar el frío y la humedad, dragar canales y colaterales, eliminar toxinas, calor, etc.

7. Lista de empaque

- 1 x mango de RF Sextupole
- 1 x Mango de cavitación 2.0 Unoisetion de 40K
- 1 x cabezal RF de vacío y bipoar
- 1 x mango RF de 3 polos
- 1 x mango RF cuadrupolo
- 1 x microcorriente y fotón
- 6 x paletas láser LED grandes
- 2 x paletas láser LED pequeñas
- 1 x martillo frío caliente
- 1 x cable de alimentación
- 1 x máquina principal

8. Diagramas operativos

Ajuste de parámetros	Producto	Técnicas	Diagramas
Anti-envejecimiento facial: 60 min, 1-2 veces / semana			
<p>Energía RF: 30% -80% Modo: PRO Fotón LED: Energía: 30% -80% Modo: colores Cambiando Brillante Color: seleccione según piel. Martillo frío: Modo: Frío</p>	<p>Maquillaje Mascarilla base de lavado facial removedor + Vapor frío y caliente Crema para masajes Mascarilla facial esencia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desmaquillar y limpiar el rostro, 5 min. 2. Aplicar tóner, 1 min. 3. Aplicar la mascarilla base y utilizar vapor caliente, 10 min. 4. Quitar la mascarilla y limpiar el rostro, 3 min. 5. Masajear la cara, aplicar la crema de masaje en la cara de manera uniforme, acariciar, 3 veces. 	 <p>Technique 11, 15</p> 
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Acaricia todo el rostro, 3 veces. 7. Use ambas manos para levantar la cara como si estuviera tirando de la cuerda, 1 min. 8. Alterne las manos para levantar la cara como si se arrancara el cuerda en un lado, 1 min. 9. Haz lo mismo con el otro lado. 10. Alterne ambas manos para levantar en 3 líneas desde la barbilla hasta el lóbulo de la oreja, la comisura de la boca hasta la puerta de la oreja, el ala de la nariz a la sien, el párpado 	



	<p>inferior hacia la sien, levante el canto, 3 veces.</p> <p>11. Levante hacia las líneas del cabello en la frente, 3 veces.</p> <p>12. Haz lo mismo con el otro lado.</p> <p>Operación</p> <p>13. RF: Mueva la sonda de la mandíbula al lóbulo de la oreja, de la esquina de la boca a la puerta de la oreja, del ala de la nariz a la sien en círculos, 3 veces.</p> <p>14. Rocíe la piel con la sonda y otra mano libre para mantener la superficie de tratamiento tensa y levantada; pasar de la mandíbula al lóbulo de la oreja, la comisura de la boca a la puerta de la oreja, el ala de la nariz a la sien, el párpado inferior a templo para levantar el área de tratamiento, 3 veces.</p> <p>15. Combinado con las manos para levantar hacia la línea del cabello en la frente, 3 veces.</p> <p>16. Haz lo mismo con el otro lado.</p> <p>18. Limpiar la cara, 3 min.</p> <p>18. Aplicar la esencia uniformemente sobre el rostro, 1 min.</p>	<p>Technique 12, 16</p>  <hr/> <p>Technique 14</p>  <hr/> <p>Technique 20</p>  <hr/> <p>Technique 21</p> 
--	---	--







	<p>19. Opere el fotón LED en la cara horizontalmente, en círculos, 3 veces</p> <p>21. Opere horizontalmente en círculos en la frente, u opere horizontalmente hacia adelante y hacia atrás en la frente, 3 veces.</p> <p>22. Opere en la cara de manera fija, 3-5 veces.</p> <p>23. Aplicar hidratante facial enmascare y opere el martillo frío, use la técnica del sello para operar en toda la cara, 3 veces.</p> <p>24. Retirar la mascarilla facial, limpiar el rostro, 3 min.</p> <p>25. Aplicar tónico, esencia, crema y protector solar.</p>	
--	--	--

Tratamiento sugerido:

10 tratamientos representan un curso completo. Después de un tiempo, la piel se siente caliente y parece limpia y brillante. Después de un curso completo, la piel está translúcida, suave, fina y completamente nutrida con un aumento de la regeneración del colágeno. Dos cursos ayudan a aumentar la elasticidad de la piel, aumentar el metabolismo de la piel, desintoxicar, desvanecer las manchas pigmentadas e iluminar la piel apagada. Tres cursos ayudan a consolidar el efecto y a prevenir la flacidez y laxitud de la piel.

Antiedad de ojos: 45 min, 1-2 veces / semana

<p>Energía de RF: 30% -80%</p> <p>Modo: PRO</p>	<p>Removedor de maquillaje</p> <p>Tónico para lavado de cara</p> <p>Esencia de ojos</p> <p>Parches para los ojos</p>	<ol style="list-style-type: none"> Desmaquillar y limpiar el rostro, 5 min. Aplicar tónico, 1 min. Aplique la esencia uniformemente alrededor de los ojos y masajee suavemente, 1 min. Mueva las manos con movimientos circulares alrededor 	<p>Technique 3, 5, 10</p>  <p>Technique 4</p>  <p>Technique 6</p>
---	--	---	---






	<p>de los ojos y empuje 3 veces</p> <p>5. Mueva los dedos medio y anular horizontalmente debajo párpados inferiores y deslizar hacia la parte posterior de la oreja, 3 veces.</p> <p>6. Levante los dedos medio y anular desde la esquina interna del ojo hasta los párpados superiores y deslícelos hacia la parte posterior de la oreja, 3 veces.</p> <p>7. Levante las esquinas de los ojos con un gesto de la mano de "tijera", 3-5 veces.</p> <p>8. Repita la operación anterior en el otro lado, 3 veces.</p> <p>9. Mueva las manos con movimientos circulares alrededor de los ojos y empuje las sienes, de 3 a 5 veces.</p> <p>10. Operación RF Mueva la sonda debajo del párpado inferior en pequeños círculos y muévala hasta la sien, 3-5 veces.</p> <p>11. Combinado con la mano, mueva la sonda desde el párpado inferior hasta la sien para levantar el área de tratamiento, 3-5 veces.</p> <p>12. Levante desde el principio de las</p>	 <p>Technique 7</p>  <p>Technique 8</p>  <p>Technique 11</p>  <p>Technique 12, 14</p>  <p>Technique 13</p> 
--	--	---


		<p>cejas hasta el final, 3-5 veces.</p> <p>13. Combinado con la mano, mueva la sonda para levantar la esquina de los ojos hacia la línea del cabello, 3-5 veces.</p> <p>14. Haz lo mismo con el otro lado.</p> <p>15. Aplicar mascarilla, 15 min.</p> <p>16. Quítese la mascarilla, lávese los ojos y la cara limpia, 2 min.</p> <p>17. Aplicar tónico, esencia facial, esencia de ojos, crema y protector solar.</p>	
--	--	--	--

Tratamiento sugerido:





10 tratamientos representan un curso completo. Una vez hecho esto, los ojos se levantan y tensan, aumentando la circulación sanguínea hacia los ojos. Después de una sesión, aclara las líneas finas, los círculos oscuros debajo de los ojos e ilumina la piel. Después de 3 sesiones, la piel alrededor de los ojos está firme, tierna y brillante, mejorando y previniendo el envejecimiento de los ojos.


Rejuvenecimiento de cuello: 60 min. 1-2 veces/semana







<p>Energía de RF: 30%-80%</p> <p>Modo: PRO</p>	<p>Removedor de maquillaje</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desmaquille y limpie el rostro, 5 min. 2. Aplique tónico, 1 min. 3. Masajee el cuello: aplique y frote aceite en el pecho con ambas manos en la parte posterior del cuello y presione 3 veces. 4. Alternativamente, levante la mandíbula inferior y la papada para pasar detrás de la oreja y debajo de la axila, 3 veces. 	<p>Technique 3</p>  <p>Technique 4, 12</p>  <p>Technique 5, 6, 7, 13</p>  <p>Technique 15</p>  <p>Technique 16</p> 
--	--------------------------------	--	--

	<p>5. Empuje hacia abajo con la mano extendida, 3 veces.</p> <p>6. Empuje hacia abajo con 4 dedos, 3 veces.</p> <p>7. Empuje hacia abajo con los dedos arrodillados hasta que el cuello se caliente y deslice hasta la axila, 3 veces.</p> <p>8. Empuje hacia abajo con la mano extendida 3-5 veces.</p> <p>9. Haz lo mismo con el otro lado</p> <p>10. Lavar el cuello. 2 minutos.</p> <p>11. Aplique la esencia uniformemente en el cuello, 1 min.</p> <p>12. Operación RF Junto con masaje manual, levante la papada para pasar detrás de la oreja y debajo de la axila, 3 veces.</p> <p>13. Mueva el dispositivo en círculos en un lado del cuello para pasar por debajo de la axila, 3 veces.</p> <p>14. Deslice el dispositivo desde la clavícula interna y externa hasta la axila, 3-5 veces.</p> <p>15. Mueva el dispositivo en círculos en toda el área del cuello, 3 veces.</p> <p>16. Acoplado con la mano, levante el</p>	 <hr data-bbox="1112 415 1377 420"/>
--	---	---






		<p>cuello en líneas, 3-5 veces.</p> <p>17. Haz lo mismo con el otro lado.</p> <p>18. Aplicar mascarilla para el cuello, 15 min.</p> <p>19. Quítese la mascarilla y limpie el cuello, 2 min.</p> <p>20. Aplicar tónico, esencia y crema para el cuello.</p>	
<p>Tratamientos sugeridos:</p> <p>10 tratamientos representan un curso completo. Después de un tratamiento, la piel se vuelve tierna y suave. Después de las sesiones completas, la piel del cuello se vuelve suave, acelera la circulación linfática del cuello. Después de 2 sesiones, reafirma la piel, atenúa las líneas del cuello y mejora la papada. Después de 3 sesiones, la piel está fina, firme y brillante, lo que también promueve el drenaje linfático, mejora la opacidad facial, algunos problemas como el acné y retrasa el envejecimiento de la piel, hace que la piel recupere su estado joven.</p>			
<p>Mejora de la papada: 45 min, 2-3 veces / semana</p>			
<p>Energía RF: 30% -80% Modo: PRO Almohadilla láser</p>	<p>Removedor de maquillaje</p> <p>Lavado de cara</p> <p>Tónico</p> <p>Crema para masajes</p> <p>Gel facial</p>	<p>1. Quitar el maquillaje y limpiar la barbilla y el cuello, 5 min.</p> <p>2. Aplicar la crema de masaje uniformemente en la papada, 1 min.</p> <p>3. Haga que cuatro dedos se alineen a lo largo de la línea de la mandíbula para levantar las manos hacia el lóbulo de la oreja, de 5 a 8 veces.</p> <p>4. Alterne las manos para levantar desde el músculo masetero hasta la sien, y luego deslice hacia los canales linfáticos en el costado del cuello, 5-8 veces.</p>	





	<p>5. Deslícese hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la línea de la mandíbula con los dedos arrodillados, 5-8 veces.</p> <p>6. Haz lo mismo con el otro lado.</p> <p>7. Limpie el área tratada, 2 min.</p> <p>8. Aplique gel uniformemente en la zona de tratamiento, 1 min.</p> <p>9. Operación de RF Junto con la mano, mueva lentamente la sonda a lo largo de la línea de la mandíbula hasta el lóbulo de la oreja, de 5 a 8 veces.</p> <p>10. Deslícese hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la línea de la mandíbula, 5-8 veces.</p> <p>11. Muévase con pequeños movimientos circulares sobre la papada, 5-8 veces.</p> <p>12. Haz lo mismo con el otro lado.</p> <p>13. Limpie la zona tratada, 1 min.</p> <p>14. Pads de lipolaser Fije los pads pequeños de lipo-láser en la papada usando correas. Espere 30 minutos más o menos.</p> <p>15. Retire las correas y las almohadillas.</p>	 <p>Technique 4</p>  <p>Technique 5, 10</p>  <p>Technique 11</p> 
--	--	---

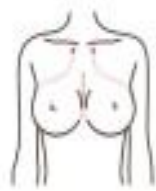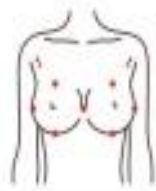		16. Limpie la zona tratada y aplicar tóner.	
<p>Tratamientos sugeridos: 10 tratamientos representan un curso completo. Se aconseja tratar 2-3 veces la primera semana. Un mes de uso persistente ayuda a tensar y levantar la piel. Trate una vez a la semana para mejorar el efecto después de haber alcanzado el ideal.</p>			
<p>Moldeamiento de cintura y abdomen: 60 min, 1-2 veces / semana</p>			
<p>RF de vacío Energía: 30% -80% Succión: 0,3-1,0 Liberación: 0-0,5 Modo: M1 Energía 40K: 30% -80% Modo: Consecutivo Almohadillas láser Energía: 30% -100% Modo: M1</p>	<p>Aceite de esencia Gel Toalla</p>	<p>1. Aplique y frote aceite en el abdomen con las manos, 3 veces. 2. Frote el estómago hacia adelante y hacia atrás con ambas manos, 3-5 veces. 3. Masajee el abdomen con ambas manos utilizando técnicas quiroprácticas, 3 veces. 4. Mueva las manos como si estuviera escribiendo un número "8" en la cintura, 3 veces. 5. Superponga las manos y envíe un mensaje al canal intestinal en el sentido de las agujas del reloj, 3 veces. 6. Mueva las manos con movimientos circulares y acaricie el área de tratamiento, 3 veces. 7. Empuje ambos pulgares hacia el ombligo del abdomen, deslícelos hasta la cintura y levántelos hacia la ingle, 3 veces.</p>	<p>Technique 1, 7, 10</p>  <hr/> <p>Technique 2</p>  <hr/> <p>Technique 3</p>  <hr/> <p>Technique 4</p>  <hr/> <p>Technique 5</p>  <hr/> <p>Technique 6</p>

	<p>8. Acaricie el área de tratamiento con las manos y deslícelas hasta la ingle.</p> <p>9. Aplique gel en el abdomen de manera uniforme, 1 min.</p> <p>10. Operación 40K Comenzando desde un lado de la cintura, levante el dispositivo hasta el abdomen y la ingle, una línea al lado de la otra, 3 veces.</p> <p>12. Repita la operación anterior en el otro lado, 3 veces.</p> <p>13. Mueva el dispositivo sobre el abdomen con pequeños movimientos circulares, 3 veces.</p> <p>14. Mueva el dispositivo sobre el abdomen con grandes movimientos circulares, 3 veces.</p> <p>17. Mueva la sonda para dar forma a la cintura como si escribiera "8", 3-5 veces.</p> <p>18. Mueva la sonda hacia arriba y hacia abajo para dar forma a la cintura, 3-5 veces.</p> <p>19. Combinado con la mano, levante Meridian BV en ambos lados de la cintura, 16 veces.</p> <p>20. Limpiar el abdomen con una</p>	 <hr/> <p>Technique 8</p>  <hr/> <p>Technique 9</p>  <hr/> <p>Technique 12</p>  <hr/> <p>Technique 14, 23</p>  <hr/> <p>Technique 15, 24</p>  <hr/> <p>Technique 16</p>
--	--	---







		<p>toalla caliente, 2 min.</p> <p>21. Aplique la esencia en el abdomen de manera uniforme, 1 min.</p> <p>22. Operación de RF al vacío Comenzando desde un lado de la cintura, levante el dispositivo hasta el abdomen y la ingle, una línea al lado de la otra, 3 veces.</p> <p>23. Mueva el dispositivo sobre el abdomen con pequeños movimientos circulares, 3-5 veces.</p> <p>24. Mueva el dispositivo sobre el abdomen con grandes movimientos circulares, 3-5 veces.</p> <p>25. Mueva la sonda hacia arriba y hacia abajo para dar forma a la cintura, 3-5 veces.</p> <p>26. Limpie el abdomen con una toalla seca.</p> <p>27. Ate el vendaje en la cintura, inserta los pads láser y fíjalas. Tiempo 20-30 min.</p> <p>28. Retire los pads.</p> <p>29. Limpie el área de operación.</p>	
Moldeamiento de senos: 60 min, 1-2 veces / semana			
Energía de RF: 30%-80% Modo: PRO	Crema de masaje Aceite para masajes	1. Frote el área de tratamiento, 3 veces.	

	<p>2. Superponga ambas palmas desde Ren-17 señale al pecho ambos lados hacia adelante y hacia atrás como si escribiera un número "8", 3 veces.</p> <p>3. Levante el seno accesorio hasta el ligamento suspensorio alternativamente con ambas manos, primero a la izquierda, luego a la derecha, 10 veces.</p> <p>4. Acaricie el área de tratamiento, 3 veces. 7. Siéntese al lado del cliente, primero a la izquierda, luego a la derecha, con ambas manos para calmar y levantar el pecho, 3-5 veces.</p> <p>5. Presione alternativamente el conducto mamario alrededor del pecho (un círculo del pecho), 3-5 veces.</p> <p>6. Use el pulgar para dragar los nódulos en el pecho, 3 veces.</p> <p>7. Levante todo el pecho con las manos, 3-5 veces.</p> <p>8. La técnica del otro lado es la misma que la anterior.</p> <p>9. Operación de RF Primero a la izquierda, luego a la derecha, de abajo hacia arriba a lo</p>	 <p>Technique 2</p>  <p>Technique 4</p>  <p>Technique 5</p>  <p>Technique 7</p>  <p>Technique 8, 12</p>
--	--	--

	<p>largo de la dirección del pecho al pezón, combinada con pacificación de la mano, 5-8 veces.</p> <p>10. Dibuje medio círculo a lo largo del pecho para levantar y tirar desde la parte inferior hasta la clavícula, combinándolo con la comodidad de la mano, de 5 a 8 veces.</p> <p>11. Haga pequeños círculos para limpiar el sitio del nódulo de 3 a 5 veces.</p> <p>12. El cliente se acuesta de lado y se pone de pie con los brazos. El dispositivo quema grasa en círculos en la posición del pecho auxiliar, 5-8 veces.</p> <p>12. El instrumento se empuja desde la posición del pecho auxiliar de la axila hasta el pecho (dando forma y recibiendo el pecho auxiliar), 5-8 veces.</p> <p>13. La técnica del otro lado es la misma que la anterior.</p> <p>18. Limpiar los senos con una toalla caliente.</p>	 <p>Technique 17, 25</p>  <p>Technique 18, 26</p>  <p>Technique 22</p> 
--	---	--

Tratamiento sugerido:

Diez veces representan un curso de tratamiento. Después de un ciclo completo, los senos experimentarán calor, se aumentará la circulación sanguínea y se verá un cierto efecto de mejora. Después de un curso de tratamiento, el efecto es más obvio, los nódulos mejoran. 3 cursos ayudan a tensar la piel y consolidar el efecto modelador y aumentar la elasticidad de los senos. La regulación endocrina hace que las mujeres sean más atractivas.

Moldeamiento de brazos: 60 min, 1-2 veces / semana		
<p>Energía RF: 30% -80% Modo: PRO Energía 40K: 30% -80% Modo: Intermitente Pads de laser pequeños Energía: 30% -100%</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Orden de izquierda a derecha: coloque el brazo plano, aplique y frote aceite desde la parte inferior del brazo hasta todo el brazo y deslice hasta los dedos, 3 veces. 2. Empuje todo el brazo con ambas palmas, 3 veces. 3. Acaricie el área de tratamiento, 3 veces. 4. Trace y frote tres canales colaterales principales en los brazos con el dedo arrodillado hacia adelante y hacia atrás hasta que se calienten, 3 veces. 5. Acaricie el área de tratamiento, 3 veces. 6. Frote tres canales hacia adelante y hacia atrás con los dedos arrodillados, 3 veces. 7. Acaricie la zona de tratamiento y deslice hasta los dedos. 8. Repita la operación anterior en el otro lado. 9. Aplique gel en los brazos de manera uniforme. 10. Operación 40K Coloque los brazos en posición horizontal y comience desde la parte grasa del
 <p>Technique 7</p>  <p>Technique 8, 17, 19</p>  <p>Technique 9</p>  <p>Technique 13, 16</p>  <p>Technique 14, 15</p> 		

		<p>antebrazo, trazando tres canales hasta la axila, 3 veces.</p> <p>11. Mueva el dispositivo en movimiento anular, trazando tres canales hasta la axila, 3 veces.</p> <p>12. Puede duplicar la operación en brazos flácidos, 3 veces.</p> <p>13. Trace tres canales hasta la axila, 3 veces.</p> <p>14. Coloque el brazo interno en posición horizontal y empuje tres canales en la parte superior del brazo hasta la axila, 3 veces.</p> <p>15. Trace tres canales en la parte superior del brazo y mueva el dispositivo en círculos hasta la axila, 3 veces.</p> <p>16. Trace tres canales desde la parte superior del brazo hasta la axila.</p> <p>17. Operación de RF Rastreo de tres canales hasta la axila, 3 veces.</p> <p>18. Mueva el dispositivo en movimiento anular, trazando tres canales hasta la axila, 3 veces.</p> <p>19. Coloque el brazo interno en posición horizontal y empuje tres canales en la parte superior del brazo hasta la axila, 3 veces.</p>
--	--	---

		<p>20. Trace tres canales en la parte superior del brazo y mueva el dispositivo en círculos hasta la axila, 3 veces.</p> <p>21. Repetir la operación anterior en el otro lado.</p> <p>24. Ate el vendaje en la grasa de los brazos, inserte las almohadillas láser y fíjelas. Tarda 20-30 min.</p> <p>22. Quite las almohadillas láser y limpie el área de operación.</p>	
<p>Tratamiento sugerido: 10 tratamientos dan cuenta de un curso completo. Una vez hecho esto, se sentirá cálido y apretado, y los brazos estarán relajados. Una sesión de tratamiento ayuda a reducir el exceso de grasa en los brazos y la piel parece estar tersa y tersa. 2 sesiones de tratamiento comenzaron a dar forma a los brazos, fortalecer el efecto, dragar meridianos y mejorar el físico. 3 sesiones ayudan a consolidar la estabilidad y prevenir el rebote.</p>			